



SPLENDORX

This is how confidence feels



BLENDX™
teknolojisinden
güç alan tek
estetik cihazı



Dünya Lideri'nden Dünya'da Bir İlk

Lazer ve enerji tabanlı teknolojilerde dünya lideri olan Lumenis tarafından sunulan SPLENDOR X, epilasyon ve cilt tedavilerini daha önce hiç olmadığı gibi sonsuz bir cilt tonu yelpazesinde özelleştirmenizi sağlar.



BLEND X

Nd:YAG (1064nm) ve Alexandrite (755nm) dalga boylarında, senkronize ve ayarlanabilir oranlarda ikili lazer emisyonu.



Kare şekilli spot boyutları

Örtüşme ve sıcak noktaları elimine etmek ve cildin tamamını eşit şekilde kapsayabilmek için, 27x27mm'ye kadar



Hızlı tedaviler

Büyük spot boyutları ve hızlı tekrarlama oranı



Çok yönlü tedavi ve cilt çözümleri

Kırışıklık azaltma, vasküler ve pigmentte lezyonlar




Sonsuz olasılıklar. Olağanüstü çok yönlülük

BLEND X ile güçlendirilmiş SPLENDOR X, benzeri görülmemiş güç, hız ve kapsama oranına sahip gerçekten eşsiz bir katı hal lazer sistemidir

İkili Nd:YAG ve Alexandrite Lazer Emisyonu

BLEND X teknolojisi ile Alexandrite 755nm ve Nd:YAG 1064nm dalga boyları, bireyin cilt tipine, kıl rengine ve kalınlığına göre tedaviyi uyarlamak için değişen oranlarda ateşlenecek şekilde senkronize edilebilir, güvenli ve etkili bir tedavi sağlar.

Güçlü, hızlı ve çok yönlü SPLENDOR X, çok çeşitli epilasyon prosedürlerini gerçekleştirir, kırışıklık azaltma, vasküler ve pigment lezyonlar gibi cilt koşullarını tedavi eder.

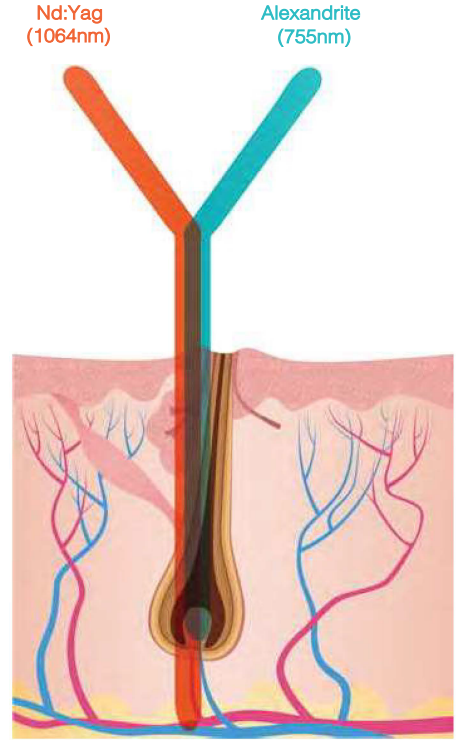


BLEND X teknolojisi, daha fazla etki için saç folikülünü iki farklı derinlikte hedefler.

Olağanüstü güç, benzeri görülmemiş hız


SPLENDOR X çok güçlüdür ve 250W çıkış gücü ile yüksek akış, büyük spot boyutu ve yüksek tekrarlama oranını birleştirerek hızlı kapsama oranı sağlar.

Devrim niteliğinde kare spot boyutu

Devrim niteliğindeki kare şeklindeki lazer noktası, daha derinlere nüfuz eden daha büyük noktalar ile tedavi alanının daha hızlı ve düzgün bir şekilde kapsanmasını sağlar. Örtüşme yok, yanık yok ve kaçırılan alanları rötüşlemek yok.

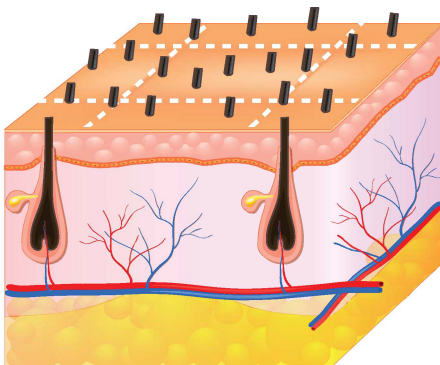

Takip edilmesi kolay bir grid matrisi sağlayan benzersiz UV Cilt İşaretleme ile hassas kapsama daha da basit hale getirildi.

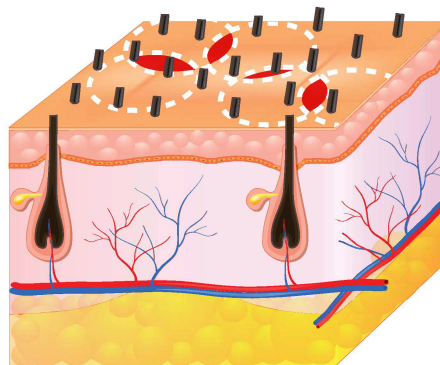

Geleneksel yuvarlak spot boyutları, etki ve güvenliği etkileyen tutarsız kapsama ile sonuçlanır.

Eşsiz ve benzersiz

Gelişmiş ergonomik başlık, daha fazla konfor için duman tahliyesini ve soğutulmuş havayı eş zamanlı sağlar

Dahili duman tahliye cihazı

Entegre bir duman tahliye cihazı ve HEPA filtre dumansız bir ortam sağlar. Bu sayede tedavi sağlayıcısının ve müşterinin sağlığını korur.

DCS (Dual Cooling System)

Cryo-Touch ve Cryo-Air'i bir arada sunan Cryo Tip, lazer ışını tedavi alanının tam üzerine soğuk hava vermek için tasarlanmıştır. Tam olarak tedavi alanının üzerinde, dokulardan ısıyı aktif olarak uzaklaştırır.



Küresel konektör

Hortumu adeta bir kola dönüştüren ve esnemeyen bir bağlantı noktasıyla mücadele etmeye gerek kalmadan, el aletinin daha kolay hareket etmesini sağlar.

Her spot boyutu için değiştirilebilir lensler

SPLENDOR X, daha uzun lamba ömrü, sarf malzemesi olmaması ve uzaktan servis özellikleri sayesinde daha kısa sürede daha fazla yatırım getirisi sağlar.

Self-Lamp-Replacement™

Herhangi bir sistem kesintisi olmadan ve bir teknisyene gerek kalmadan lazer flaş lambasını sadece saniyeler içinde kendiniz değiştirin.

Uzaktan Servis Bağlantısı

Gelişmiş servis yazılımı, sertifikalı mühendislerin sistemde uzaktan sorun gidermesine, kalibre etmesine ve yükseltmesine olanak tanıyarak çalışma süresini artırır.

Klinik sonuçlardaki güven

Lazer Epilasyon

Önce



Sonra



Lumenis Ltd. tarafından sağlanmıştır.



Prof. Leonardo Marini, M.D.
Skin Doctors' Center
Trieste, İtalya

"SPLENDOR X'in tüm cilt tiplerinde epilasyon, vasküler lezyonların fotokoagülasyonu için etkinliği, hızı ve güvenliğinden çok etkilendim. Koyu cilt tiplerinin yanı sıra ince tüylere de eşsiz sonuçlarla çözüm getiriyor. Tedavinin hızı inanılmaz ve hastalar sadece dört seansta etkileyici / uzun vadeli sonuçlar alıyorlar. Sarf malzemesi olmadığı için yatırımın geri dönüşü hızlı oluyor."



Mary P. Lupo, M.D.
Dermatolog, ABD

"SPLENDOR X, lazer epilasyon teknolojisinde bu alandaki diğer tüm platformların üzerinde bir kuantum sıçraması."



SPLENDOR X ile yolculuğunuz daha yeni başlıyor

İşletmenizin Splendor X ile büyümesini istiyoruz. Bu nedenle, ilk görüşmeyle başlayan ve işletmeniz faydalarını görmeye başladıkça sizinle birlikte kalacak bir destek paketi oluşturduk. İhtiyacınız olan tüm eğitimi almanızı ve en güncel klinik materyalleri edinmenizi sağlıyoruz. Doğrudan tüketiciye yönelik pazarlama faaliyetlerimiz markayı desteklemekte ve Lumenis lazer epilasyonun dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler tarafından tercih edilen bir tedavi olmasını sağlamaktadır.



Lumenis Uygulama Bulucu

Her ay binlerce hasta tedavi sağlayıcıları arıyor. Kliniğinizi Lumenis Uygulama Bulucu'ya kaydederek kliniğinizi bulmalarına yardımcı olun. Bu dizini tanıtmak için influencer'lar, sosyal medya ve viral videolar aracılığıyla kampanyalar yürütüyoruz.



Lumenis.com

Tüketicilerin lazer epilasyon tedavileri hakkında pek çok sorusu bulunmaktadır. Hastalara yönelik özel web sitemiz, onlara tedavilere devam etmek için ihtiyaç duydukları güvenceyi ve güveni verecektir.



Ekip Eğitimi

Sistemi kuruyor ve personelinizi eğitiyoruz, böylece cilt tiplerini ve koşullarını değerlendirebiliyor ve her bir hasta için mükemmel tedavi planını oluşturabiliyoruz. 'Uzman' klinik eğitimi, konsültasyon ve tedavilerin güven içinde ele alınacağı anlamına gelir.



En Değerli Kaynağınız

Özel temsilciniz size bir e-posta, metin veya telefon uzaklığında. Kendinizi Lumenis ailesinin bir parçası olarak hissetmenizi istiyoruz, bu nedenle lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size 24 saat içinde geri dönmek için her zaman elimizden geleni yapacağız.



Kliniğinizi Markalaştırın

Bir Lumenis müşterisi olarak Lumenis Physician Portal'a erişiminiz olacaktır. Burada broşür ve poster gibi materyalleri bulabilirsiniz. Ayrıca çok sayıda klinik ve ürün bilgisine de erişebilirsiniz.



En İyi Uygulama Pazarlaması

Bireysel Lumenis temsilciniz, kendi işinize göre uyarlayabileceğiniz pazarlama planlarını paylaşabilecektir. Bunlar başarı için 90 günlük kriterlerden sadakat programları ve promosyonlara kadar uzanmaktadır.

Platform	BLEND X Teknolojisiyle Splendor X				
Konfigürasyonlar	Alex + Nd:YAG	Alex	Alex ²	Nd:YAG	
Lazer Kaynağı	Alexandrite ve Nd:YAG lazer kaynakları	Tek Alexandrite lazer kaynağı	2 Alexandrite lazer kaynağı	Nd:YAG (Uzun Atış)	Nd:YAG (Kısa Atış)
Dalga Boyu (nm)	755 / 1064	755	755	1064	
Maks. Enerji (J)	55+ 80	55	110	80	1
Atış Süresi (ms)	3 - 100	3-100	3-50	3-100	0.34
Atış Tekrarlama Oranı (Hz)	3'e kadar	3'e kadar	3'e kadar	3'e kadar	10'a kadar
2 Hz'de Maks. Ortalama Güç (W)	110+ 140	110	220	140	N/A
Soğutma Sistemi	DCS (Dual Cooling System)				
Boyut & Ölçüler	180 Kg-470 x 1100 x 1040 mm (UxDxY)				
Elektriksel Gereksinimler	200-230VAC; 50/60Hz; 25A				
Kare spot boyutları (mm)	2x2,3x3,5x5,10x10, 14x14,18x18, 20x20, 24x24,27x27	2x2,3x3,5x5, 10x10,14x14, 18x18,20x20	2x2, 3x3, 5x5, 10x10,14x14, 18x18,20x20, 24x24,27x27	2x2,3x3, 5x5, 10x10, 14x14, 18x18, 20x20	
Yuvarlak spot boyutları (mm)	2-3-5-10-14 18-20-24 -26-30	2-3-5-10 14-18-20-24	2-3-5-10-14 18-20-24 -26-30	2-3-5-10 14-18-20 -24	2-3-5-10 14-18-20-24
2 Hz ve 20J/cm ² Akış'ta Maks. Spot Boyutu (mm)	26	18	26	20	n.d.

Kullanım endikasyonları

Alexandrite & Nd:Yag - Epilasyon, kalıcı tüy azaltma* ve Pseudofolliculitis Barbae (PFB) tedavisi.

Anjiyomlar, hemanjiyomlar, telenjektazi ve diğer iyi huylu vasküler lezyonlar ve bacak damarları dahil olmak üzere vasküler lezyonların tedavisi.

İyi huylu pigmentli lezyonların tedavisi.

Nd:Yag - **Yumuşak dokunun koagülasyonu ve hemostazı, kırışıklıklar, **yara izleri, siğiller, onikomikoz / ayak tırnağı mantarı **dövmeler)

* Kalıcı tüy azalması, bir tedavi rejiminin tamamlanmasından 6, 9 ve 12 ay sonra ölçüldüğünde yeniden çıkan tüylerin sayısındaki uzun vadeli, istikrarlı azalma olarak tanımlanır. Fitzpatrick cilt tipleri 1 - VI, bronzlaşmış cilt dahil

**AB dışındaki pazarlar için

Uyarılar ve Riskler

Tedavi bölgesinde aşağıdaki durumlar olan hastalarda tedavi denenmemelidir: herhangi bir aktif enfeksiyon, enflamatuvar cilt koşulları, Displastik Nevüs, dövmeler, aktif uçuklar, açık yırtıklar veya sıyrıklar, viral, fungal veya bakteriyel hastalıklar veya post enflamatuvar hiperpigmentasyon öyküsü, keloid skar öyküsü. Epilasyon, pigment açma/koyulaştırma, vasküler lezyonlar ve kırışıklık pigmentli lezyonlar için lazer tedavisinin en yaygın acil yanıtı eritem, ödem, perifoliküler ödem ve perivasküler ödem, vasküler ağartma, hiperpigmentasyon ve hipopigmentasyon veya tedavi edilen alanların dokusal değişiklikleridir. Kontrendikasyonların ve risklerin tam listesi SPLENDOR X kullanım kılavuzunda bulunabilir.

Lumenis Hakkında

Lumenis, cerrahi, oftalmoloji ve estetik pazarları için minimal invaziv klinik çözümler alanında küresel bir liderdir ve lazer, yoğun atımlı ışık (IPL) ve radyo frekansı (RF) dahil olmak üzere enerji tabanlı teknolojiler geliştirme ve satma konusunda dünya lideridir. Lumenis'in çığır açan ürünleri 50 yılı aşkın süredir tıbbi tedavileri yeniden tanımlamış, çok sayıda teknolojik ve klinik altın standart belirlemiştir.

Bios S.r.l
Via Guido Rossa
10/12 - 20090
Vimodrone (MI) -İtalya
T +39 02 27304275 F
+39 02 27304276
info@biosgroup.eu
www.biosgroup.eu

AMERİKA
San Jose,CA,ABD
T +1 408 764 3000
+1 877 586 3647
F +1 408 764 3999

JAPONYA
Tokyo,Japonya
T +81 3 6743 8300
F +81 3 6743 8301

ASYA PASİFİK
Pekin, Çin
T+ 86 10 5737 6677
F +86 10 5737 6767

Gurgaon, Hindistan
T+ 91 124 422 07 95
Kowloon,Hong Kong
T+ 852 217 428 00 F
+ 852 272 251 51

EMEA
Dreieich
Dreieichenhain,
Almanya
T +49 6103 8335 0
F +49 6103 8335 300

Roma, İtalya
T +39 06 90 75 230
F +39 06 90 75 269

Hertfordshire, Birleşik
Krallık
T +44 20 8736 4110
F +44 20 8736 4119

Lumenis (Almanya) GmbH
Heinrich-Hertz-Str 3 D-63303
Dreieich-Dreieichenhain
ALMANYA
Tel: +49 (0) 6103 8335 0

© LUMENIS LTD 2019

Lumenis®
Energy to Healthcare



LUMENIS.COM/SPLENDOR X



PB-2010603 Rev F